


Studex System 75 Instrukcja Przekłuwania uszu



1. Odklej papier uszczelniający z jednego opakowania blister. Nie wyjmuj ładunku z kolczykiem z opakowania.




2. Trzymając mocno boki opakowania, wsuń ładunek do kanału aparatu, najpierw przód, a następnie tył wkładu.

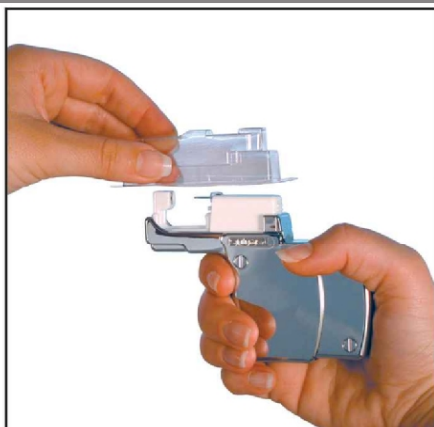


3. Zdejmij plastikowe opakowanie. Nie wyrzucaj go, gdyż przyda się później.



4. Zaznacz punkt przekłucia ucha (uszu) nietoksycznym pisakiem chirurgicznym.

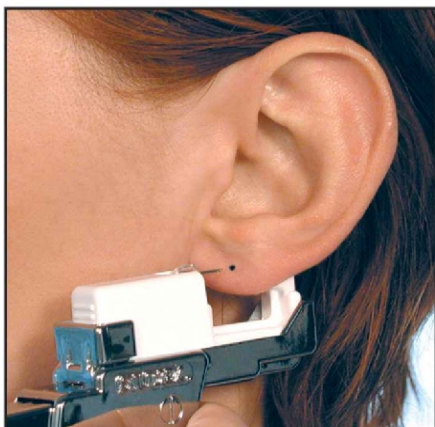

5. Umieść ucho pomiędzy czubkiem kolczyka a zapinką, zbliżając czubek kolczyka do kropki na uchu, wolno ściskając rękojeść aparatu.

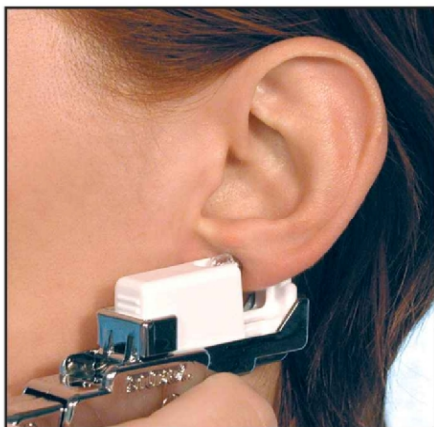

6. Utrzymując właściwe ustawienie, ściśnij mocno rękojeść aparatu, aby przekłuć ucho. Zapinka zostanie automatycznie zapięta na kolczyku.



7. Zwolnij nacisk dłoni na rękojeść aparatu i ostrożnie opuść aparat do dołu. To uwolni kolczyk z przezroczystego, plastikowego uchwytu oraz zapinkę z wkładu.



8. Po przekłuciu, umieść to samo opakowanie blister, w którym był ładunek, na pustym wkładzie od góry.



9. Ściskając boki opakowania wyciągnij wkład do góry i nieco do przodu, aby uwolnić wkład z kanału aparatu. Umieść zużyty ładunek z opakowaniem w pojemniku zgodnym z przepisami sanitarnymi.

Studex Poland Ltd. Sp. z o.o., 92-434 Łódź, ul. Maćka z Bogdańca 16a
Tel.: (042) 671-19-90; Infolinia: 0800-168-008; Fax (042) 671-13-23
www.studex.pl • e-mail: studex@studex.pl